实验名称:迈克尔孙分光仪的调节和使用

学生姓名: 张一萌 学号: 2313636

一、实验目的:

- 1.了解迈克尔逊干涉仪的结构、原理和调节方法
- 2.观察等倾、等厚干涉现象
- 3.利用等倾干涉测量 He-Ne 激光光源的波长

二、实验原理:

1. 迈克耳孙干涉仪

迈克尔逊干涉仪是一个分振幅法的 双光束干涉仪,其光路如图 4-5-1 所示, 它由反射镜 M1、M2、分束镜 P1 和补偿 板 P2 组成。其中 M1 是一个固定反射镜, 反射镜 M2 可以沿光轴前后移动,它们分 别放置在两个相互垂直臂中;分束镜和补 偿板与两个反射镜均成 45°,且相互平行; 分束镜 P1 的一个面镀有半透半反膜,它 能将入射光等强度地分为两束;补偿板是

一个与分束镜厚度和折射率完全相同的玻璃 板。

迈克尔逊干涉仪的结构如图 4-5-2 所示。镜 M1、M2 的背面各有三个螺丝,调节 M1、M2 镜面的倾斜度,M1 的下端还附有两个互相垂直的微动拉簧螺丝,用以精确地调整 M1 的倾斜度。M2 镜所在的导轨拖板由精密丝杠带动,可沿导轨前后移动。M2 镜的位置由三个读数尺所读出的数值的和来确定: 主尺、粗调手轮和微调手轮。


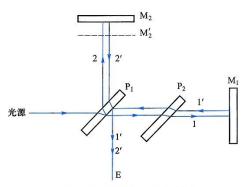


图 4-5-1 迈克耳孙干涉仪光路



如图 4-5-3 (a) 所示,多光束激光器提供的每条光纤的输出端是一个短焦距凸透镜,经其会聚后的激光束,可以认为是一个很好的点光源 S 发出的球面光波。 S_1' 为 M1 及 G1 反射后所成的像, S_2' 为 S 经 G1 及 M2 反射后所成的像。 S_1' 和 S_2' 为两相干光源,发出的球面波在其相遇的空间处处相干,为非定域干涉,在相遇处都能产生干涉条纹。空间任一点 P 的干涉明暗由 S_1' 和 S_2' 到该点的光程差 Δ = r2-r1 决定,其中 r2 和 r1 分别为 S_2' 和 S_1' 到 P 点的光程。P 点的光强分布的极大和极小的条件是

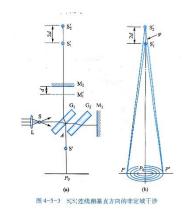

2. 光的干涉原理

频率相同的两束光,当相位差为波长的整数倍时,波峰与波峰叠加,波谷与波谷叠加。即某点距两束光的波程差

根据三角函数公式, 当相位差为2π的整数倍时, 图像保持不变。

同理,两束光的光程差相差**λ**的整数倍时,始终是波峰遇波峰,波谷遇波谷,干涉增强,表现出亮点

$$\Delta = k\lambda$$

光程差:

$$\Delta = 2d\sqrt{n2^2 - n1^2 sin^2 i} + \frac{1}{2}\lambda$$

¹λ是由于半波损失引入的附加项

当 d、n1、n2 固定,光程差只与倾角 i 有关,我们将这种干涉命名为等倾干涉我们将薄膜上、下表面用平面反射镜来代替,并放置于空气中,此时 n1=n2=1,也没有半波损失,光程差计算公式可以简化为:

$$\Delta = 2dcosi$$

3. 等倾干涉(He—Ne 激光波长的测定)

当 φ =0 对应圆心位置,也是我们研究光圈吞吐的情况。

当 M_1' 与 M2 平行时,将观察屏放在与 $S_2'S_1'$ 连线相垂直的位置上,可看到一组同心干涉圆条纹,如图 4-5-3(b)所示。

设 M_1' 与 M2 间距离为 d,则 S_2' 和 S_1' 距离为 2d, S_2' 和 S_1' 在屏上任一点 P 的光程差为 $\Delta = 2dcos \varphi$

 φ 为 S'_2 射到 P 点的光线与 M2 法线的夹角。

当改变 d,光程差也相应发生改变,这时在干涉条纹中心会出现"冒出"和"缩进"的现象。当 d 增加 $\lambda/2$,相应的光程差增加 λ ,在中心的条纹干涉级次由 k 变为 k+1,这样就会"冒出"一个条纹;当 d 减少 $\lambda/2$,相应的光程差减少 λ ,在中心的条纹干涉级次由 k 变为 k-1,这样就会"缩进"一个条纹。因此,根据"冒出"或"缩进"条纹的个数可以确定 d 的改变量,它可以用来进行长度测量,其精度是波长量级。当"冒出"或"缩进"了 N 个 条纹,d 的改变量 δd 为:

$$\delta d = N \frac{\lambda}{2}$$

即

$$\lambda = 2 \frac{\Delta d}{\Delta k}$$

三、实验仪器用具:

迈克尔逊干涉仪, He-Ne 多光束光纤激光器

- 四、操作步骤
- 1. 调节干涉仪,观察非定域干涉
 - (1) 水平调节。调节干涉仪底脚螺丝, 使仪器导轨平面水平, 然后用锁紧圈锁住。

- (2) 等臂调节。调节粗调手轮移动 M2 镜, 让 M1、M2 镜与分光板 G1 大致等距离。
- (3))最亮点重合。打开激光开关,检查激光输出嘴的位置和方向,让光束垂直射向 M1 的中心 部位。将观察屏转向一侧并固定,带上墨镜,直接观察 M2 镜,视野中呈现两排分别由 M1 、 M2 反射回来的亮点,找准每排亮点中最亮的那个点,分别调节 M1 和 M2 两个反射镜背后 的调节螺丝(先调 M1 ,再调 M2),使两排亮点中最亮的光点严格重合,此时说明 M1 已垂 直于 M2 。注意调节时调节螺丝的松紧要均衡,防止损坏调节螺丝。
- (4) 条纹移到屏中央。将观察屏转回原位置,若上一步的中最亮点已经严格重合,则观察 屏 上可以观察到圆形干涉条纹,若没有条纹,可能是亮点没严格重合,或者条纹在 屏幕边缘。 调节粗调手轮使条纹大小、粗细适中,再轻微调节 M1 镜上的水平或竖 直拉簧螺丝,使圆形 条纹的中心位于屏中央。
- (5) 观察非定域干涉。前后左右移动屏的位置和角度,发现干涉条纹的大小或形状发生变化,证明非定义域干涉是空间处处相干的。
- (6) 条纹特征与 d 的关系。调节粗调手轮前后移动 M2 ,观察条纹的"冒出"或"缩进"现象,判断 M1'与 M2 之间的距离 d 是变大还是变小,并观察条纹的粗细、疏密和 d 之间的关系。

2. 测量激光波长


- (1) 仪器调零。因为旋转微调手轮时,粗调手轮随之变化,而旋转粗调手轮时微调手轮并不随之变化,所以测量前必须调零。方法如下:沿某方向(例如顺时针)将微调手轮调到零并记住旋转方向(为避免空程差,后面的测量都要沿此方向),沿同一方向旋转粗调手轮使之对准某一刻度,注意此后粗调手轮不要再动。测量过程中若需要反方向旋转微调手轮,则一定要重新调零。
- (2) 测量并计算波长。沿刚才的方向旋转微调手轮,条纹每冒出或缩进 50 个记录相应的M2 的位置,连续记录 6 次以上,用最小二乘法计算激光的波长。

五、实验数据记录及处理:



条纹移动数 N	0	50	100	150	200	250
可移动镜位置	51.63150	51.64680	51.66220	51.67812	51.69401	51.71042
d/mm						

d~N最小二乘法拟合曲线

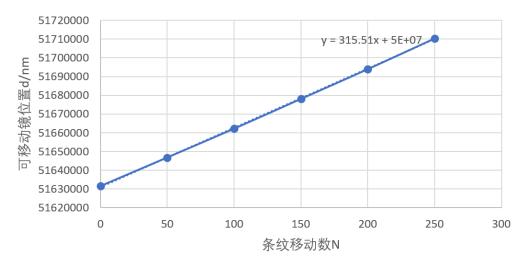

$$\lambda_{M} = 2 \frac{\Delta d}{\Delta k} = 2 \times 315.51 = 631.02nm = 631.0nm$$

$$\lambda_{\underline{\pi}} = 632.8nm$$

相对误差
$$\mu = \frac{|\lambda_{\cancel{A}} - \lambda_{\cancel{M}}|}{\lambda_{\cancel{B}}} = \frac{|632.8 - 631.0|}{632.8} \times 100\% \approx 0.2844\% \approx 0.28\%$$

六、思考题

1. 补偿板G2的作用是什么?

补偿板是一个与分束镜厚度和折射率完全相同的玻璃板。

作用是使两臂光程达到完全对称。

分束镜 G1 将入射光分为两束,其中射向 M2 的光路少一次在分束镜 G1 中的往返过程,这个过程会带来较大的光程差。补偿板与分束镜完全相同,可补偿该光路少的光程,从而使两臂光程完全对称。

2. 什么改变Δd只能朝一个方向?

迈克尔干涉仪由于内部是靠齿轮咬合的,而齿轮与齿轮之间存在间隙,在开始转动微调手轮的时候,齿轮和齿轮会慢慢咬紧,所以虽然微调手轮已经开始转动了,但是反射镜M1的位置其实没有变化。必须等齿轮完全咬紧后,反射镜的位置才能随着微调手轮的变化而变化。即为了避免空程差,改变Δd只能朝一个方向。

七、实验总结

在实验过程中, 要注意避免激光直接入眼。

不能用手触摸各光学元件。

在观察干涉条纹时,在黑暗的环境中,才更容易观察。

同时,该实验仪器很灵敏,如果不能保持实验台的稳定很容易造成干涉条纹的不稳定, 对观察造成影响。